

新発売記念キャンペーン

ユニバーサルタイプボンディング材

「プライム&ボンドユニバーサル」&

ユニバーサルコンポジットレジン

「セラメックススフィアテックワン」

キャンペーン期間
2018年

6月21日
～
8月29日

プライム&ボンドユニバーサル導入パック

歯面の湿潤環境に強いユニバーサルボンディング材「プライム&ボンドユニバーサル」と相性が良いコンポジットレジン「セラメックススフィアテックワン」1本をセットにしたパッケージをご用意しました。



- 湿潤環境でも安定した接着性を実現、乾燥の難しい症例などにも適合
- 窩洞に自然に広がり薄い皮膜を形成、術後痛のリスクを軽減
- 滴下後最長 30 分使用可能、複数歯の処置も無駄なく使用が可能

セット内容

- ・プライム&ボンドユニバーサル 4.0ml リフィル 1本
- ・クリックスティッシュ 1個
- ・アプリケーターチップ 100 本入 1個
- ・ステップカード・クラウドシェードチャート 1本
- ・セラメックススフィアテックワン 3.0g 1本

キャンペーン希望小売価格

12,900円

セラメックススフィアテックワン MI パック

わずか 5 色で VITA16 色をカバーするユニバーサルレジン「セラメックススフィアテックワン」と相性が良いユニバーサルボンド「プライム&ボンドユニバーサル」を 2.5ml をセットにしたパッケージをご用意しました。



- シンプルなシェードシステムで色あわせが簡単
- 賦形性が高く、形態付与も思いのまま
- 短時間で光沢を得られる優れた研磨性

セット内容

- ・A セラメックススフィアテックワン A1, A2, A3, A3.5 各 1 本 (3g 入)
または
- ・B セラメックススフィアテックワン A2, A3, A3.5, A4 各 1 本 (3g 入)
+
- ・セラメックススフィアテックワン専用スタンド 1個
- ・プライム&ボンドユニバーサル 2.5ml 1本
- ・アプリケーターチップ 100 本入 1個
- ・クリックスティッシュ 1個
- ・ステップカード・クラウドシェードチャート 1セット

キャンペーン希望小売価格

14,000円

プライム&ボンド ユニバーサル

新技術のアクティブガード テクノロジーが歯面の水分をコントロールし、接着阻害要因を除去。均質で薄い皮膜を形成するため安定した接着を実現します。




アクティブガードテクノロジーとは、デンツプライシロナ社が開発したひとつの分子内に親水性と疎水性をバランスよく持ったベースモノマーです。水分との接触や溶媒の揮発による層分離を起こさず、さまざまな環境下で安定した操作が可能となりました。また、機能性モノマーには歯質やジルコニアなどの金属にも高い接着性能を発揮するMDP*モノマーと、PENTAを配合しており、高く効率的な接着性能を発揮します。


* 10-methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate

1. 湿潤環境の歯面でも安定した接着性

アクティブガードモノマーは歯面上の水と接触しても分離せず、均質層を形成。分離することなく被着面にムラなく塗布できるため、歯面環境に影響されず安定した接着を実現。

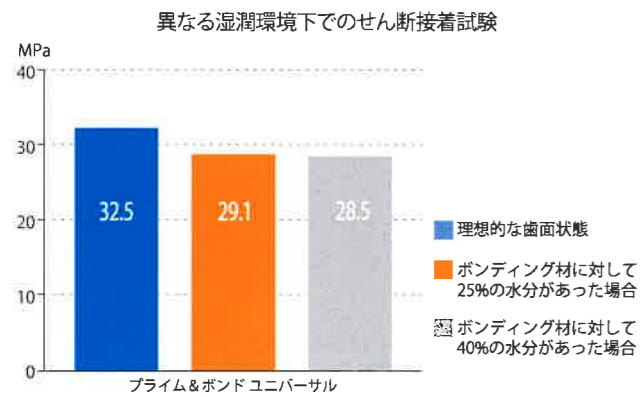


プライム&ボンド ユニバーサルは過度に湿潤した象牙質でも安定した接着性能を示した。(データ測定：デンツプライディトレイ社)

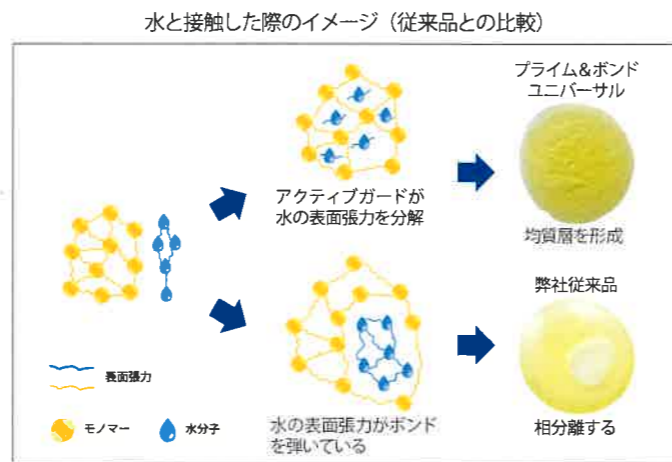

2. 窩洞に自然に広がり薄い皮膜を形成

ボンディング材を塗布すると同時にアクティブに窩洞に自然に広がってゆき、薄く均一な皮膜を形成します。塗りムラによるドライスポットの発生やギャップの形成がなく、術後痛のリスクも軽減します。

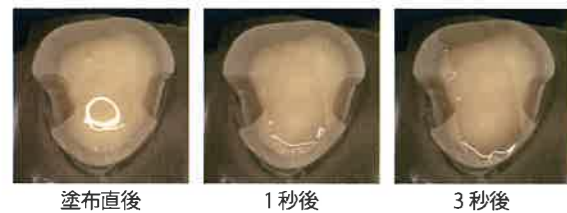

塗布直後 1秒後 3秒後
ボンディング材を塗布後、数秒で薄く自然に広がる様子



弊社従来品



5~10µm以下の薄い皮膜を形成

3. 滴下後最長 30分使用可能

専用のクリックスディッシュの遮光下では30分間使用が可能です。複数歯にわたる処置の際にも1滴を無駄なく使用可能です。



セラメックス スフィアテックワン

5色のシェードでVITA16色をカバーするため色あわせが簡単。更に新技術のスフィアテックフィラーの配合により高い賦形性を実現、思いどおりの形態付与と高い研磨性が得られます。

セラメックス スフィアテック ワンは独自のシェードコンセプトに基づいてシェード設計され、高いカメレオン効果により色調適合しやすくなっています。また、粒状フィルター技術により微細なサブミクロンフィラーから平均3~15µmの真球状のフィラーに造粒された真球状のスフィアテック フィラーの配合により、メリハリのある操作感、器具へのべたつきの抑止、優れた研磨性を実現しています。



1. シンプルなシェードシステムで色あわせが簡単

VITA16シェードをベースに近似したシェードを5つのグループに分け、同じグループ内であればどの色にも合致するよう設計しました。これによってセラメックスは1本のシェードで複数のシェードをカバーします。



2. 賦形性が高く、思いのままに形態付与が可能

スフィアテックフィラーの働きにより、チクソ性が高く、充填操作中は適度な流動性があるものの、インストゥルメントを離すとそのままの形が留まることによって賦形した状態を維持し、複雑な形態も再現しやすくなります。咬頭部や隆線、列溝など臼歯部における細かな賦形もストレスなく行えます。




充填時に力を加えると、スフィアテック フィラーがボールが転がるような動きをし、わずかな力で賦形が可能です。

力が加わっていない状態の時には、サブミクロンフィラーがスフィアテック フィラーの転がりを抑止する働きをする事で形態を保ち、垂れずにとどまります。

3. 短時間で光沢が得られる優れた研磨性

スフィアテック フィラーは平均0.6 µmのサブミクロンフィラーにより造粒された球状フィラーのため、研磨時には研磨材が当たった部分の微細なフィラーのみが研削され、短時間で光沢が得られます。

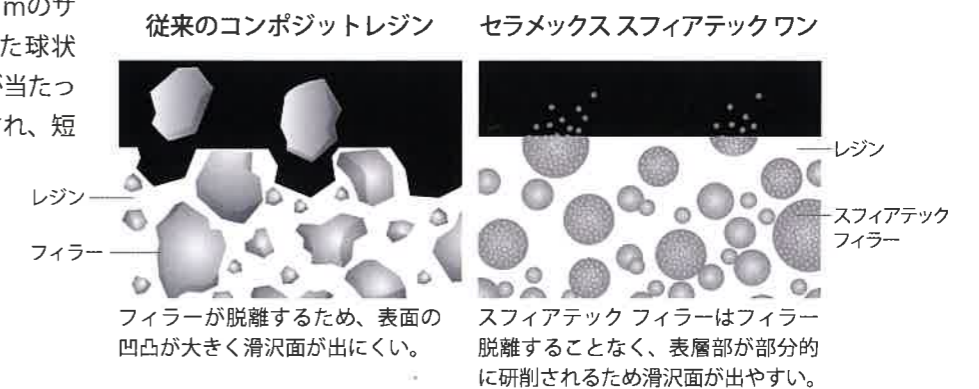

User's Voice

vol.1 鷺野 崇 先生

vol.2 大谷 一紀 先生

キャンペーン品一覧

プライム&ボンドユニバーサル導入パック

品番	品名	構成品	注文数
60667350PA1	プライム&ボンドユニバーサル導入パック A1 セット	プライム&ボンドユニバーサル 4.0ml 1本 セラメックス スフィアテック ワン A1 (3.0g) 1本	
60667350PA2	プライム&ボンドユニバーサル導入パック A2 セット	プライム&ボンドユニバーサル 4.0ml 1本 セラメックス スフィアテック ワン A2 (3.0g) 1本	
60667350PA3	プライム&ボンドユニバーサル導入パック A3 セット	プライム&ボンドユニバーサル 4.0ml 1本 セラメックス スフィアテック ワン A3 (3.0g) 1本	
60667350PA3.5	プライム&ボンドユニバーサル導入パック A3.5 セット	プライム&ボンドユニバーサル 4.0ml 1本 セラメックス スフィアテック ワン A3.5 (3.0g) 1本	
60667350PA4	プライム&ボンドユニバーサル導入パック A4 セット	プライム&ボンドユニバーサル 4.0ml 1本 セラメックス スフィアテック ワン A4 (3.0g) 1本	

セラメックス スフィアテック ワンMIパック

品番	品名	構成品	注文数
60701621P	セラメックス スフィアテック ワン MI パック A	セラメックス スフィアテック ワン A1, A2, A3, A3.5 各 1本 (3.0g) プライム&ボンドユニバーサル 2.5ml 1本 クリックスディッシュ 1個 アプリケーターチップ 1個	
60701624P	セラメックス スフィアテック ワン MI パック B	セラメックス スフィアテック ワン A2, A3, A3.5, A4 各 1本 (3.0g) プライム&ボンドユニバーサル 2.5ml 1本 クリックスディッシュ 1個 アプリケーターチップ 1個	

各製品単品

品番	品名	価格	注文数
60667350ST	プライム&ボンドユニバーサル スターターキット	12,900 円	
60667350	プライム&ボンドユニバーサル 4.0ml リフィル	11,000 円	
60701621	セラメックス スフィアテック ワン A1	3,500 円	
60701622	セラメックス スフィアテック ワン A2	3,500 円	
60701623	セラメックス スフィアテック ワン A3	3,500 円	
60701625	セラメックス スフィアテック ワン A3.5	3,500 円	
60701624	セラメックス スフィアテック ワン A4	3,500 円	
60701564	セラメックス スフィアテック ワン シェードガイド	3,500 円	

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号	クラス分類
セラメックス ST One	歯科充填用コンポジットレジン	229AGBZX00070000	II (管理医療機器)
プライム&ボンド ユニバーサル	歯科用象牙質接着剤	230AGBZX00043000	II (管理医療機器)

①キャンペーン商品の返品および交換は一切しかねます。②他の特別価格商品と併用してご利用いただくことはできません。③本キャンペーンをご注文いただく際には、本チラシの注文欄をご利用いただくか、注文用紙にキャンペーンである旨を必ずご記入下さい。④各種数量限定につき、期間中でも品切れの場合は終了とさせていただきます。

ご施設名：

〒□□□-□□□□ ※郵便番号は必ず記入してください。

ご住所：

TEL：

FAX：

指示	入力	確認

※弊社では、お申込により取得した個人情報を厳重に管理し、予めご本人の同意を得ることなく第三者への開示・提供することはいたしません。当社での個人情報利用目的は下記の通りです。
1. お申込に伴うご連絡 2. 弊社からのセミナー・サービス・新商品のご案内への利用 □各種情報・案内を希望しない (印が付いていない場合は、「希望する」とさせていただきます。)

デンツプライシロナ株式会社 東京本社 〒106-0041 東京都港区麻布台1-8-10
カスタマーサービス ☎0120-789-123 (受付時間 9:00~17:00 土日祝祭日を除く)